


INMU BENUTZER- HANDBUCH


ÜBERSICHT

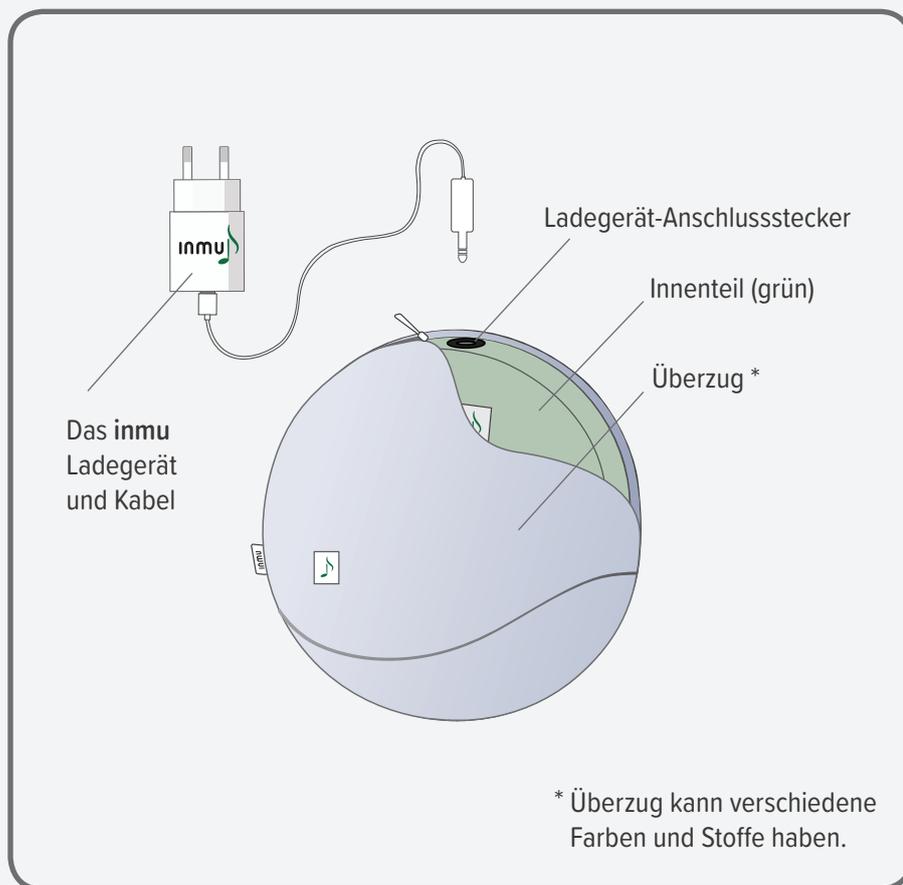

Sehen Sie sich die Schulungsvideos an und erfahren Sie mehr über **inmu** unter [inmutouch.com/support](https://www.inmutouch.com/support) oder wenden Sie sich an den Support unter info@inmutouch.com


inmu
touch

EINSCHALTEN

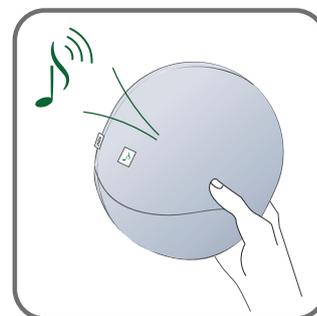


Das **inmu** wird mit einer Berührung aktiviert, worauf die Musik gestartet wird. Wenn es angeschlossen ist, ziehen Sie das Kabel heraus.

AUSSCHALTEN

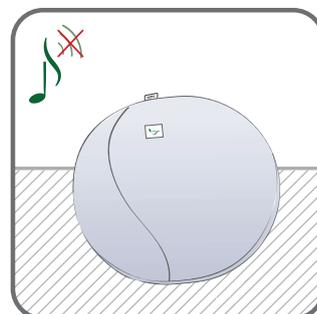


Die Musik schaltet sich automatisch aus, wenn das **inmu** still liegen bleibt. Hinweis: Es ist kein Kabel notwendig.

DEAKTIVIEREN

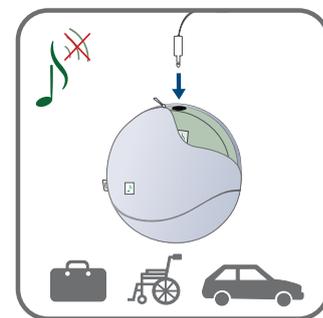


Stumm beim Transport: Öffnen Sie den Reißverschluss des Überzugs, schließen Sie das Kabel an. Das **inmu** bleibt stumm bis das Kabel herausgezogen wird.


WASCHEN DES ÜBERZUGS

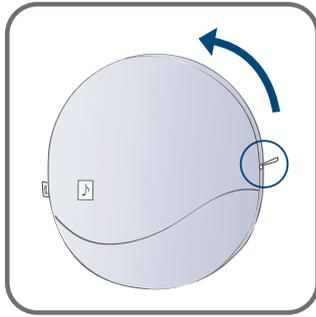

Finden Sie den Reißverschluss. Öffnen Sie den Reißverschluss. Nehmen Sie den Überzug ab.

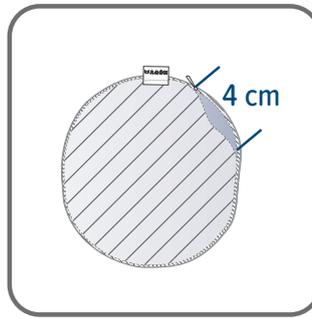

Drehen Sie den Überzug auf links. Ziehen Sie den Reißverschluss wieder zu und lassen Sie eine Öffnung von 4 cm zur einfacheren Handhabung.

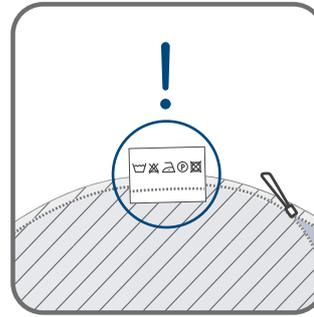


Waschen Sie den Überzug gemäß den Anweisungen auf dem Pflegeetikett.




Maschinen- oder Handwäsche.


TROCKNEN DES ÜBERZUGS

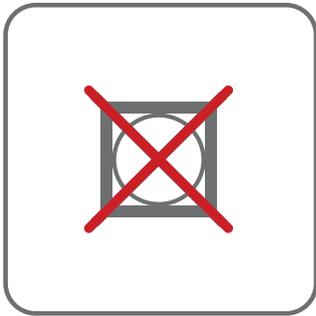


Nicht im Wäschetrockner trocknen.

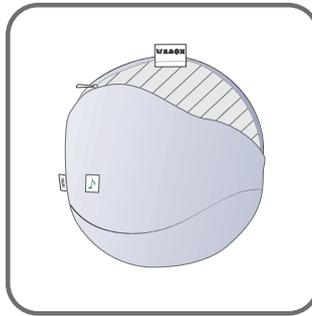

Drehen Sie den Überzug wieder auf rechts.

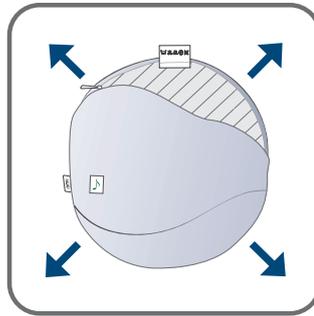


Ziehen Sie den Überzug vorsichtig wieder in Form, solange er noch feucht ist.

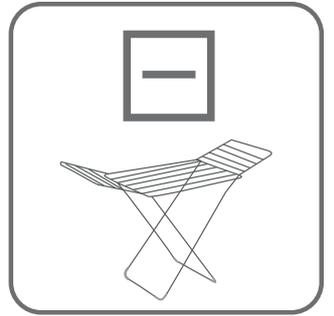


Liegend an der Luft trocknen, z. B. auf einem Handtuch.


ÜBERZUG AUFZIEHEN

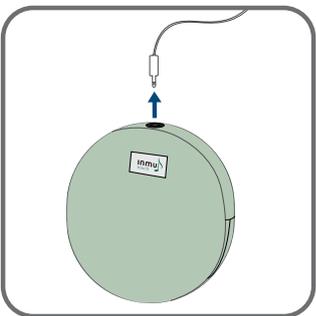


Ziehen Sie das Kabel heraus, falls es angeschlossen ist.

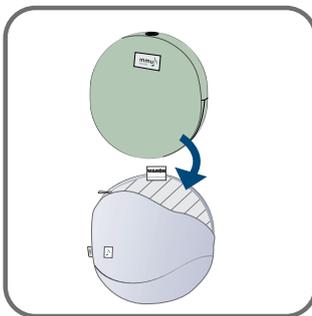

Ziehen Sie den Überzug auf.

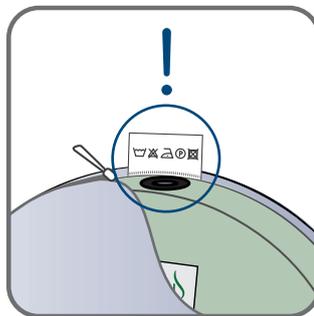


Bitte beachten! Achten Sie darauf, dass das Pflegeetikett und die Kabelbuchse übereinanderliegen.

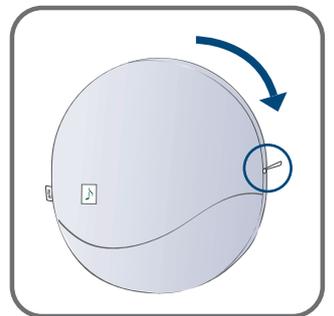


Ziehen Sie den Reißverschluss zu und verstecken Sie den Schiebergriff.


AUFLADEN

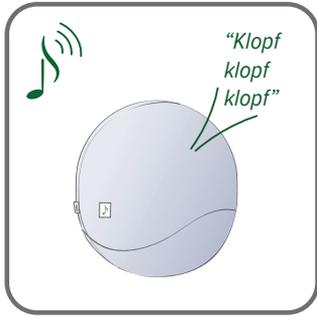


Wenn die Batterie fast leer ist, ertönt ein dreimaliges Klopfsignal. Das inmu muss dann aufgeladen werden.

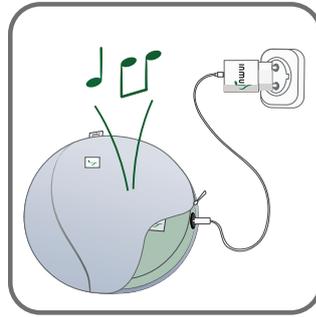

Finden Sie den Reißverschluss. Öffnen Sie den Überzug. Schließen Sie das Kabel und das Ladegerät an. Es ertönt ein Signal, das anzeigt, dass der Ladevorgang begonnen hat.

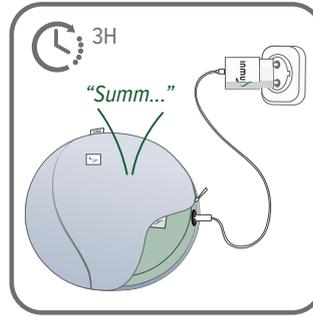


Ladedauer: bis zu 3 Stunden. Bis der Akku aufgeladen ist, ertönt ein Summgeräusch. Die Lautstärke stellt den Ladezustand des Akkus dar.

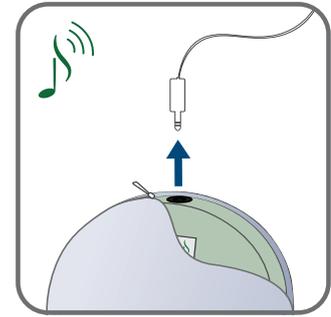


Wenn das Summgeräusch aufhört, ist das inmu vollständig aufgeladen. Ziehen Sie den Reißverschluss wieder zu und verstecken Sie den Schiebergriff.


LAUTSTÄRKE* (Bitte befolgen Sie diese Anweisungen genau, oder sehen Sie sich die Schulungsvideos unter inmutouch.com/support an) * Wird nicht von allen inmu Modellen unterstützt. Siehe inmutouch.com.

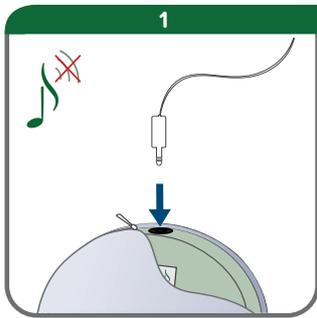


1. Aktivieren Sie die Musik. Schließen Sie das Kabel an, und das inmu schaltet sich stumm. Dann ...

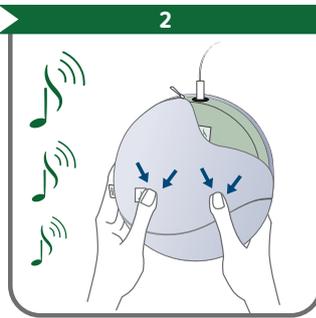

2. ... drücken Sie sofort fest gleichzeitig auf beide Seiten. Hören Sie zu und halten Sie bei der bevorzugten Lautstärke an: Niedrig, mittel oder hoch. Dann ...

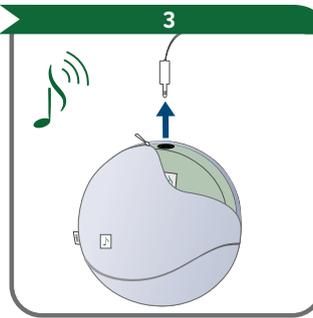

3. ... ziehen Sie das Kabel sofort wieder heraus, um die bevorzugte Einstellung zu speichern. Ziehen Sie den Reißverschluss wieder zu und verstecken Sie den Schiebergriff.

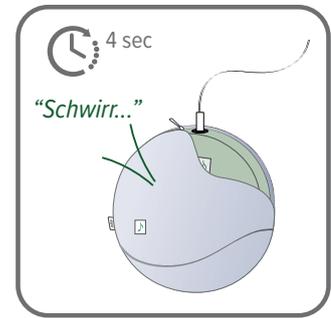


Die Einstellung sollte innerhalb von 4 Sekunden abgeschlossen sein. Sollte ein Schwirrgeräusch zu hören sein, war die Einstellung nicht erfolgreich. Wiederholen Sie dann Schritte 1-2-3.


WARTUNG




Das inmu ist wasserabweisend. Es kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

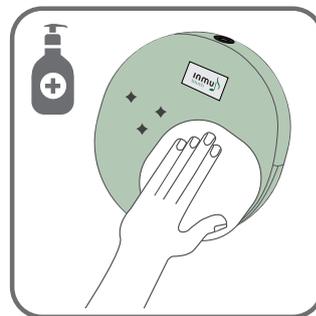

Der Überzug und das Gerät können mit einem Desinfektionstuch abgewischt werden.

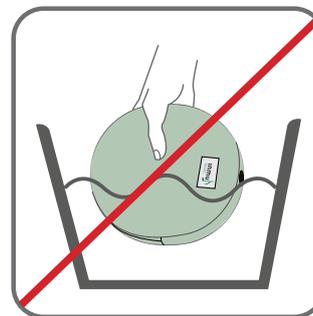

Achtung!
Das inmu ist NICHT wasserdicht.

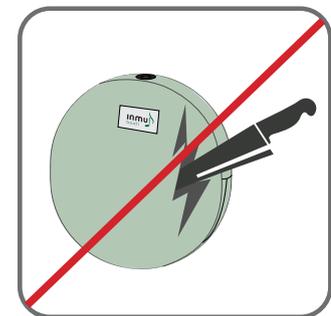

Achtung! Nehmen Sie das inmu (Gerät) nicht auseinander.


ENTSORGUNG



Das **inmu** ist mit einem aufladbaren Lithium-ionen-Akku ausgestattet, der der EU-Richtlinie 2006/66/EG entspricht und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und für die Gesundheit zu verhindern.

Modellname: **inmu Soprano**
Produktname: **inmuRELAX** und **inmuDANCE**

RECYCLING

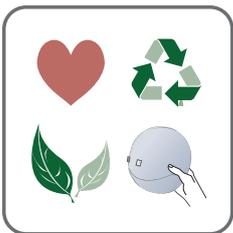

Das **inmu** besteht aus Materialien, die so nachhaltig, natürlich und hypoallergen sind wie möglich. Wir stellen unsere Produkte sorgfältig, rücksichtsvoll und respektvoll her. Berühren Sie das **inmu** – genießen Sie es und teilen Sie die Freude mit anderen ...

Sehen Sie sich die Schulungsvideos an und erfahren Sie mehr über **inmu** unter inmutouch.com/support oder wenden Sie sich an den Support unter info@inmutouch.com

SICHERHEITSHINWEIS



1. Versuchen Sie nicht, das **inmu** oder die Innenhülle (den Kern) auseinanderzunehmen.
2. Stoßen Sie das **inmu** nicht gegen scharfe oder harte Gegenstände.
3. Halten Sie das **inmu** entfernt von offenem Feuer.
4. Halten Sie das **inmu** entfernt von brennbaren Flüssigkeiten.
5. Das **inmu** ist NICHT wasserdicht. Der Kontakt mit Flüssigkeiten sollte vermieden werden.
6. Halten Sie das Ladegerät und das Kabel trocken.
7. Lassen Sie das **inmu** nicht draußen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit liegen.
8. Das **inmu** sollte nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 45 °C verwendet oder gelagert werden.
9. Das **inmu** sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 45 °C aufgeladen werden.
- 10.-12. Das **inmu** und das Ladegerät sollten nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- 13.-14. Nur das Originalladegerät und -kabel sollten zum Aufladen des **inmu** verwendet werden.
15. Das Ladegerät darf nicht auseinandergenommen werden.
16. Das **inmu** sollte nicht mehr als 100 kg anhaltendem Druck ausgesetzt werden.
17. Das **inmu** kann nur mäßige Stöße aushalten (lassen Sie es nicht aus einer Höhe von mehr als 2m fallen).
18. Das **inmu** sollte nicht als Abfall entsorgt werden. Die meisten Teile können wiederverwendet werden.

KONTAKT

Treten Sie in Kontakt mit unseren Vertriebspartnern in Deutschland:

Telefon: +49 151 4494 6414
info@inmutouch.de
www.inmutouch.de

